


# Handi-Grip<sup>®</sup> MAX




- GB** Operating instructions
- DE** Bedienungsanleitung
- NL** Bedieningsinstructies

- ES** Instrucciones de funcionamiento
- FR** Instructions d'utilisation

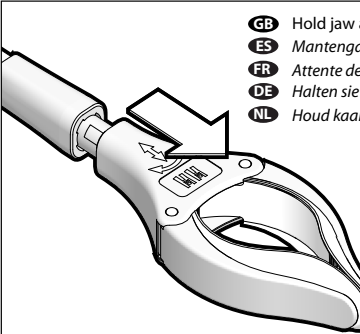


- GB** Hold jaw and collar, and pull
- ES** Mantenga pulsada de mandíbula y cuello, y tirar
- FR** Attente des mâchoires et le collier, et tirer
- DE** Halten sie blende und kragen, und ziehen sie
- NL** Houd kaaklijn en kraag, en trek

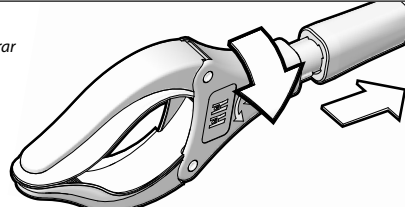

- GB** Rotate jaw 90° then push back
- ES** Girar 90° mordaza a continuación, empuje hacia atrás
- FR** Mâchoire Rotation 90° puis repoussez-la.
- DE** Drehen sie backen 90° und dann nach hinten schieben
- NL** Draai jaw 90° duw vervolgens terug

HA8326 26"/66cm Handi-Grip Max HA8332 32"/81cm Handi-Grip Max

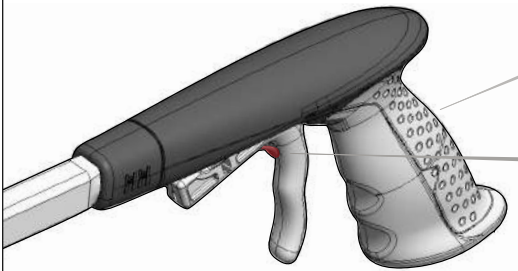

- GB** Gripcert gel handle
- ES** Mango gel gripcert
- FR** Gripcert gel poignée
- DE** Gripcert gel griff
- NL** Gripcert gel handgriep

- GB** Lock button
- ES** Botón de bloqueo
- FR** Bouton de verrouillage
- DE** Schaltfläche sperren
- NL** Toets vergrendeling

- GB** To close; pull back lock and trigger together
- ES** Para cerrar, tire hacia atrás y activar bloqueo junto
- FR** Pour fermer; tirez de blocage et déclencher ensemble
- DE** Bis zum abschluss; ziehen sie wieder schloss und auslöser zusammen
- NL** Sluiten; trek de rugleuning en trigger samen

- GB** To release; pull trigger only
- ES** Para liberar; sólo saltar
- FR** Pour libérer; tirez déclencher uniquement
- DE** Zu lösen, ziehen sie nur auslösen
- NL** Te laat; trek alleen starten

## CAUTION

- GB** - Don't use for picking up items above 60°C - Do not use as walking aid
- Do not lift objects greater than 1kg

- ES** - No lo utilice para recoger objetos con temperatura superior a 60 - No lo utilice como andador
- No lo utilice para levantar objetos de más de 1kg
- FR** - Ne pas utiliser pour ramasser des objets au-dessus de 60 degrés C - Ne pas utiliser comme dispositif d'aide à la marche
- Ne pas soulever d'objets qui pèsent plus de 1 kilogramme
- DE** - Greifen Sie keine Gegenstände, die heißer also 60°C sind - Nicht als Gehhilfe verwenden
- Greifen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 1kg
- NL** - Niet gebruiken voor het oppakken van objecten met een temperatuur boven 60°C
- Niet gebruiken als loophulpmiddel of wandelstok
- Til geen objecten op die zwaarder zijn dan 1kg




# Handi-Grip<sup>®</sup> MAX




- GB** Operating instructions
- DE** Bedienungsanleitung
- NL** Bedieningsinstructies

- ES** Instrucciones de funcionamiento
- FR** Instructions d'utilisation

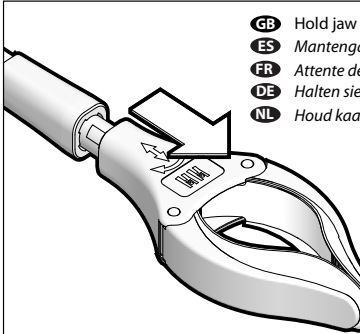


- GB** Hold jaw and collar, and pull
- ES** Mantenga pulsada de mandíbula y cuello, y tirar
- FR** Attente des mâchoires et le collier, et tirer
- DE** Halten sie blende und kragen, und ziehen sie
- NL** Houd kaaklijn en kraag, en trek

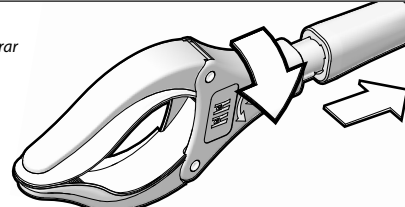

- GB** Rotate jaw 90° then push back
- ES** Girar 90° mordaza a continuación, empuje hacia atrás
- FR** Mâchoire Rotation 90° puis repoussez-la.
- DE** Drehen sie backen 90° und dann nach hinten schieben
- NL** Draai jaw 90° duw vervolgens terug

HA8326 26"/66cm Handi-Grip Max HA8332 32"/81cm Handi-Grip Max

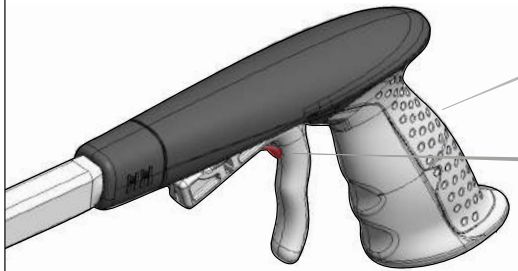

- GB** Gripcert gel handle
- ES** Mango gel gripcert
- FR** Gripcert gel poignée
- DE** Gripcert gel griff
- NL** Gripcert gel handgriep

- GB** Lock button
- ES** Botón de bloqueo
- FR** Bouton de verrouillage
- DE** Schaltfläche sperren
- NL** Toets vergrendeling

- GB** To close; pull back lock and trigger together
- ES** Para cerrar, tire hacia atrás y activar bloqueo junto
- FR** Pour fermer; tirez de blocage et déclencher ensemble
- DE** Bis zum abschluss; ziehen sie wieder schloss und auslöser zusammen
- NL** Sluiten; trek de rugleuning en trigger samen

- GB** To release; pull trigger only
- ES** Para liberar; sólo saltar
- FR** Pour libérer; tirez déclencher uniquement
- DE** Zu lösen, ziehen sie nur auslösen
- NL** Te laat; trek alleen starten

## CAUTION

- GB** - Don't use for picking up items above 60°C - Do not use as walking aid
- Do not lift objects greater than 1kg

- ES** - No lo utilice para recoger objetos con temperatura superior a 60 - No lo utilice como andador
- No lo utilice para levantar objetos de más de 1kg
- FR** - Ne pas utiliser pour ramasser des objets au-dessus de 60 degrés C - Ne pas utiliser comme dispositif d'aide à la marche
- Ne pas soulever d'objets qui pèsent plus de 1 kilogramme
- DE** - Greifen Sie keine Gegenstände, die heißer also 60°C sind - Nicht als Gehhilfe verwenden
- Greifen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 1kg
- NL** - Niet gebruiken voor het oppakken van objecten met een temperatuur boven 60°C
- Niet gebruiken als loophulpmiddel of wandelstok
- Til geen objecten op die zwaarder zijn dan 1kg

